

HIVSav 1/2/0 Rapid SeroTest™

Un ensayo rapido para la deteccion cualitativa de anticuerpos del virus humano de Inmunodeficiencia (HIV) tipo 1, tipo 2, y Subtipo O en sangre total, suero o plasma.

Manual de Instrucciones

Kit para 25 ensayos individuales en bolsas individuales

(Catalog No. A41112)

Kit para 50 tests individuales en bolsas individuales

(Catalog No. B41112)

Para Diagnostico *In Vitro*

Exclusivamente para uso profesional
Almacenar a 2-30°C. **No Congelar**

Savyon® Diagnostics Ltd.

3 Habosem St. Ashdod 77610, ISRAEL

Tel.: +972.8.8562920

Fax: +972.8.8523176

E-mail: support@savyondiagnostics.com

Norma de Uso

The HIVSav 1/2/0 Rapid SeroTest™ es una prueba rapida inmunocromatografica para su uso en la deteccion cualitativa de anticuerpos para HIV-1, HIV-2, y Subtipo O en sangre total, suero o plasma para la ayuda en la diagnosis de infeccion HIV infection.

Resumen

HIV es el agente etiológico del Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida (SIDA). El virion esta rodeado de una capa de lipidos que son derivados de la membrana de la celula huésped. Varias glicoproteinas virales estan en esta capsida. Cada virus contiene dos copias de cadenas de RNA codificante HIV-1 fue aislado de pacientes con SIDA y complejo Relacionado con SIDA, y de pacientes sanos con alto riesgo potencial de desarrollar SIDA¹. HIV-1 consiste de Subtipo M and Subtipo O. Cepas de HIV-1 altamente divergentes fueron primeramente aisladas en 1990 y agrupadas provisionalmente como Subtipo O, debido a que esta variacion tiene marcadores de glicoproteinas similares a HIV-1 pero con una pequena variacion del marcador proteico. Aunque raramente se compararon a HIV-1 y HIV-2, las infecciones causados por el Subtipo O han sido hasta ahora identificadas en Africa (Camerun), Francia y Alemania. HIV-2 ha sido aislada en pacientes provenientes del oeste de Africa y de individuos seropositivos asintomaticos². HIV-1, HIV-2, y Subtipo O todos provocan respuesta inmunitaria³. La deteccion de anticuerpos de HIV en suero, plasma o sangre total es el metodo mas eficiente y comun para determinar si un individuo fue expuesto a HIV y para detectar HIV en sangre total o derivados relacionados⁴.

A pesar de las diferencias en sus caracteres biologicos, actividades serologicas y secuencias genomicas, HIV-1, HIV-2, y Subtipo O muestran una fuerte reactividad cruzada antigenica^{5,6}. La mayoría de los suero positivos para HIV-2 pueden ser identificados usando ensayos serologicos

para HIV-1

El HIVSav 1/2/0 Rapid SeroTest™ es un ensayo rapido para la deteccion cualitativa de anticuerpos del virus humano de Inmunodeficiencia (HIV) tipo 1, tipo 2, y Subtipo O en sangre total, suero o plasma.

Principio del Procedimiento

El HIVSav 1/2/0 Rapid SeroTest™ es un inmunoensayo basado en membrana para la deteccion de anticuerpos del virus humano de Inmunodeficiencia (HIV) tipo 1, tipo 2, y Subtipo O en sangre total, suero o plasma. La membrana es previamente cubierta con anticuerpos recombinantes de HIV en la banda de ensayo, T1 y T2. La banda de ensayo t1 es precubierta con antígenos para HIV-1 y Subtipo O y la banda de ensayo T2 es precubierta con antígenos para HIV-2. Durante la prueba, la muestra de sange, suero o plasma reacciona con a mezcla de antígenos de la capsida y el núcleo de HIV-1 y antígenos de la capsida de HIV-2 que están recubiertos de partículas de color en la tira reactiva. La mezcla de raccion fluye en la tira chromatografica por acción capilar y reacciona con los antígenos recombinantes de HIV en la membrana en la región de las bandas. Si la muestra contiene anticuerpos contra HIV-1 y/o Subtipo O o HIV-2, una banda coloreada aparece en la tira reactiva, si la muestra contiene HIV-1 y Subtipo O y HIV-2, dos una banda coloreadas aparecen en la tira reactiva. Ambas bandas indican un resultado positivo. Si la muestra no contiene anticuerpos para HIV-1 y/o Subtipo O y/o HIV-2 no se vera ninguna banda coloreada en la tira reactiva indicando un resultado negative. Para servir como procedimiento de control, una banda coloreada siempre aparece en la tira reactiva del control que sirve como verificacion de que un volumen suficiente de muestra ha sido añadido y como control que ha ocurrido que absorción membranar.

Almacenamiento y Estabilidad

Almacene como está empaquetado en la bolsa sellada a temperatura ambiente o refrigerados (2-30 °C).

El dispositivo de prueba es estable hasta la fecha de caducidad impresa en la bolsa sellada. **NO CONGELAR.**

No lo use luego de la fecha de expiracion.

Precauciones

- Para uso profesional en diagnostic *in vitro*. No lo use luego de la fecha de expiracion.
- Use ropa protectora como batas de laboratorio, guantes descartables y gafas protectoras durante el procedimiento.
- No coma, beba o fume en el area de trabajo.
- Manipulee as muestras como si contuvieran agentes infecciosos. Observar las precauciones habituales contra riesgos microbiológicos durante la prueba y siga los procedimientos estándar para la eliminación adecuada de los especímenes.
- La prueba utilizada debe desecharse de acuerdo con las normativas locales.
- La humedad y la temperatura pueden afectar los resultados.

Coleccion de muestras y Preparacion

- • • El HIVSav 1/2/0 Rapid SeroTest™ se puede realizar utilizando sangre total total (de venopunción o punción en el dedo), suero o plasma.
- Para coleccionar muestras de sangre total por punción capilar:
- Lave la mano del paciente con agua tibia y jabón o limpiar

con un algodón empapado en alcohol. Deje que se seque

- Masaje la mano sin tocar el sitio de la punción frotando hacia abajo la mano hacia la punta del dedo del medio o el dedo anular.
- Pinche la piel con una lanceta nueva y estéril para cada persona. Limpie la primera señal de la sangre.
- Frote suavemente la mano desde la muñeca hasta la palma de los dedos para formar una gota redonda de sangre en el sitio de punción.
- Añada la muestra de sangre total por punción dactilar al dispositivo de prueba mediante el uso de un tubo capilar:
- Toque el extremo del tubo capilar con la sangre hasta que se han llenado de aproximadamente 50 µl. Evite las burbujas de aire.
- Coloque la bombilla en el extremo superior del tubo capilar, a continuación, presione la perilla para dispensar la sangre total encima del pocillo de la muestra (S) del dispositivo de prueba.
- Añada la muestra de sangre total por punción dactilar en el dispositivo de prueba mediante goteo:
- Coloque el dedo del paciente para que la gota de sangre es justo por encima del pocillo de la muestra (S) del dispositivo de prueba.
- Permita que 2 gotas colgantes de sangre total por punción dactilar caigan en el centro del pocillo de la muestra (S) en el dispositivo de prueba, o muevan el dedo del paciente de manera que la gota colgante toca el centro del pocillo de la muestra (S). Evite tocar con el dedo directamente el pocillo de la muestra (S).
- Separar el suero o plasma de sangre tan pronto como sea posible para evitar la hemólisis. Utilice sólo claras muestras, no hemolizadas
- La prueba debe realizarse inmediatamente después de la recogida de muestras. No deje las muestras a temperatura ambiente durante períodos prolongados. Suero y plasma las muestras pueden conservarse a 2-8° C durante un máximo de 3 días. Para el almacenamiento a largo plazo, las muestras deben mantenerse por debajo de 20 ° C. Sangre total extraída por punción venosa debe ser almacenado a 2-8 ° C si el análisis se va a realizar dentro de los 2 días de recolección. No congelar las muestras de sangre total. Sangre total recogidas por punción digital debe ser probado de inmediato
- Llevar las muestras a temperatura ambiente antes de la prueba. Las muestras congeladas deben descongelarse completamente y mezclarse bien antes de la prueba. Las muestras no deben ser congeladas y descongeladas repetidamente ..
- Si las muestras deben ser enviadas, deben ser empacados en el cumplimiento de las normas locales que cubren el transporte de agentes etiológicos.

Instrucciones de uso

Permita el dispositivo de prueba , la muestra, la solución de tampón y/o controles para llegar a la temperatura ambiente (15- 30 ° C) antes de la prueba


1. Retire el dispositivo de prueba de la bolsa de aluminio y uselo tan pronto como sea posible. Se obtendrán mejores resultados si el ensayo se realiza dentro de una hora.
2. Coloque la placa en una superficie limpia y nivelada.

Para **suero o plasma**: Sostenga el gotero verticalmente y **transfiera 1 gota de suero o plasma** (aproximadamente 25 µl) al pocillo de la muestra (S) del dispositivo de prueba, a continuación, **agregue 1 gota de solución tampón** (aproximadamente 40 µl) e inicie el cronometro. Vea la ilustración de abajo.

Para uso con muestras **de sangre total por venopuncion** : Sostenga el gotero verticalmente y **transfiera 2 gotas de sangre total** (aproximadamente 50 µl) al pocillo de la muestra (S) del dispositivo de prueba, a continuación, **agregue 2 gotas de solución tampón** (aproximadamente 80 µl) y inicie el cronometro. Vea la ilustración de abajo.

Para muestras de sangre total por puncion dactilar :

- Utilizando un tubo capilar: Llene el tubo capilar y **transfiera aproximadamente 50 µl** de punción digital de sangre total al pocillo de la muestra (S) del dispositivo de prueba, a continuación, **agregue 2 gotas de solución de tampón** (aproximadamente 80 µl) y inicie el cronometro. Vea la ilustración de abajo.
 - Para usar las gotas colgantes: **permita que 2 gotas colgantes de la muestra de sangre total** por punción digital (aproximadamente 50 µl) caigan en el centro del pocillo de la muestra (S) en el dispositivo de prueba, a continuación, **agregue 2 gotas de solución de tampón** (aproximadamente 80 µl) y inicie el cronometro. Vea la ilustración de abajo.
3. Espere a que la línea(s) de color en aparezcan. **Lea los resultados a los 10 minutos.** No lea los resultados después de 20 minutos.

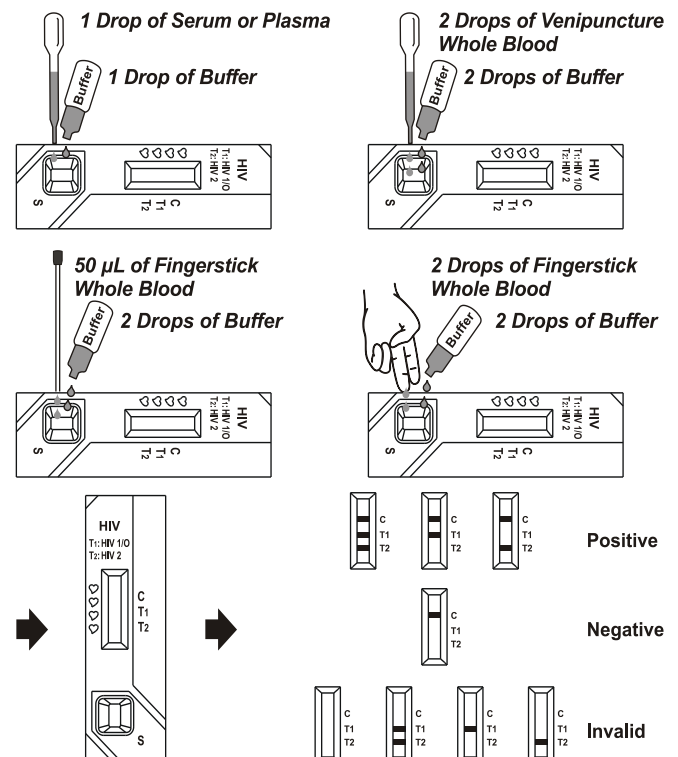

Materiales

Materiales Proporcionados

- dispositivo de prueba
- Solucion tampón
- Cuentagotas
- Prospecto

Materiales Requeridos pero no proporcionados

- Recipientes de recogida de muestras
- Centrifuga
- Tubos capilares heparinizados y bulbo de distribución (para la sangre total por punción dactilar solamente)
- Lancetas (para sangre total por punción dactilar solamente)
- Cronometro

Interpretación de los Resultados

(Por favor refiérase a la ilustración de arriba)

POSITIVO: * **Aparecen dos o tres líneas de colores distintos.** Una línea debe aparecer siempre en la región de control (C), y la otra una o dos líneas de color aparente (s) debe aparecer en la zona de la prueba (s) (T1 y / o T2).

* **NOTA:** La intensidad del color en la zona de la prueba (T1 y T2) variará dependiendo de la concentración de anticuerpos contra el HIV presente en la muestra. Por lo tanto, cualquier tono de color en la zona de la prueba (T1 y / o T2) debe ser considerado positivo.

NEGATIVO: Una línea roja aparece en la región de control (C). No hay líneas de colores aparentes aparecen en las regiones de la prueba (T1 y T2).

NO VÁLIDO: La línea de control no aparece. Un volumen de muestra insuficiente o un procedimiento incorrecto son las posibles razones de la ausencia de la línea de control. Revise el procedimiento y repita la prueba con un nuevo dispositivo de prueba. Si el problema persiste, deje de utilizar ese lote y

Control de Calidad

Un control interno está incluido en la prueba. Una línea coloreada que aparece en la región de control (C) es considerada como un procedimiento de control interno. Comprueba que el volumen de la muestra es suficiente, adecuada la reacción de la membrana y que el procedimiento es correcto.

Estándar de control no se suministran con el kit, sin embargo, se recomienda realizar controles positivos y negativos como buena práctica de laboratorio para confirmar el procedimiento de prueba y para comprobar el rendimiento de la prueba.

Limitaciones del ensayo

1. El HIVSav 1/2/0 Rapid SeroTest™ es sólo para uso diagnóstico *in vitro*. Esta prueba se debe utilizar para la detección de anticuerpos contra el HIV en la sangre total humana, suero o plasma. Ni el valor cuantitativo ni la tasa de aumento de la concentración de anticuerpos del HIV se pueden determinar mediante esta prueba cualitativa.
2. El HIVSav 1/2/0 Rapid SeroTest™ sólo indica la presencia de anticuerpos contra el HIV en la muestra y no debe ser utilizado como único criterio para el diagnóstico de HIV-1, HIV-2, y/o infección subtipo O.
3. Para confirmación, se debe realizar un análisis más detallado de los especímenes, tales como ELISA y/o análisis de Western Blot.
4. Al igual que con todas las pruebas de diagnóstico, todos los resultados deben ser interpretados junto con otra información clínica disponible al médico.
5. Esta prueba está destinada a propósitos sólo cribado. Los resultados no deben ser utilizados para determinar el serotipo del HIV.
6. Debido a la posible reactividad cruzada, la aparición de líneas en ambos T1 y T2 no indica necesariamente la co-infección de HIV-1, HIV-2 y subtipo O ni puede identificar el serotipo.

Valores Esperados

El HIVSav 1/2/0 Rapid SeroTest™ ha sido comparado con las principales pruebas comerciales de ELISA HIV y/o Western Blot. La correlación entre estos dos sistemas es 99,8%.

Características de Rendimiento

Clinical Sensitivity, Specificity and Accuracy

El HIVSav 1/2/0 Rapid SeroTest™ fue evaluada en: un estudio de campo multicéntrico, un centro de donación de sangre, y también en un estudio clínico en el local. El estudio multicéntrico incluyó 1.640 muestras procedentes de diferentes países. Se obtuvieron 1000 ejemplares del centro de donación de sangre, y el estudio clínico de la casa incluían 687 muestras y un Panel de Performance VIH que fue comprado con otro panel comercial.

El HIVSav 1/2/0 Rapid SeroTest™ se comparó con los principales pruebas comerciales de ELISA del HIV y/o Western Blot. De los 3327 ejemplares en total, 872 se encontraron positivos y 2455 especímenes fueron encontrados negativos por ELISA y/o Western Blot. El HIVSav 1/2/0 Rapid SeroTest™ mostró 99,9% de sensibilidad relativa, y 99,8% de especificidad relativa en comparación con ELISA y/o transferencia de Western.

HIVSav 1/2/0 Rapid SeroTest™ vs ELISA y/o Western Blot

Method		ELISA and or Western Blot		Resultado Total
HIV 1/2/0 Rapid SeroTest™	Resultados	Positivo	Negativo	
	Positivo	871	6	877
	Negativo	1	2449	2450
		872	2455	3327

Sensibilidad relativa: 99.9% (99.4-100.0 %)*

Especificidad relativa: 99.8% (99.5-99.9%)*

Exactitud Relativa : 99.8% (99.6-99.9%)*

* Intervalo de confianza del 95%

Precision

Ensayo intra

En la serie se ha determinado mediante el uso de 10 repeticiones de cuatro ejemplares: un negativo, un positivo bajo, positivo mediano y un positivo alto. Los valores negativos, positivos bajos, medios y altos positivo positivos fueron correctamente identificados > 99% de las veces.

Ensayo inter

La precisión dentro ha sido determinado por 10 ensayos independientes sobre las mismas cuatro muestras: una negativa, un positivo bajo, positivo mediano y un positivo alto. Tres lotes diferentes del HIVSav 1/2/0 Rapid SeroTest™ han sido probados utilizando, positivo medio y alto muestras negativas, positivas bajas positivos. Los especímenes fueron correctamente identificados > 99% del tiempo

Bibliografía

1. Chang SY, Bowman BH, Weiss JB, Garcia RE and White TJ. *The Origin of HIV-1 isolate HTLV-IIIb*. Nature (1993) 3:363:466-9.
2. Arya SK, Beaver B, Jagodzinski L, Ensoli B, Kanki PJ, Albert J, Fenyo EM, Biberfeld G, Zagury JF and Laure F. *New human and simian HIV-related retroviruses possess functional transactivator (tat) gene*. Nature (1987) 328:548-550.
3. Caetano JA. *Immunologic aspects of HIV infection*. Acta Med Port (1991) 4 Suppl 1:52S-58S.
4. Janssen RS, Satten GA, Stramer SL, Rawal BD, O'Brien

TR, Weiblen BJ, Hecht FM, Jack N, Cleghorn FR, Kahn JO, Chesney MA and Busch MP. *New testing strategy to detect early HIV-1 infection for use in incidence estimates and for clinical and prevention purposes*. JAMA (1998) 280(1): 42-48.

5. Travers K, Mboup S, Marlink R, Gueye-Nidaye A, Siby T, Thior I, Traore I, Dieng-Sarr A, Sankale JL and Mullins C. *Natural protection against HIV-1 infection provided by HIV-2*. Science (1995) 268:1612-1615.
6. Greenberg AE, Wiktor SZ, DeCock KM, Smith P, Jaffe HW and Dondero TJ Jr. *HIV-2 and natural protection against HIV-1 infection*. Science (1996) 272:1959-1960.